

Explorer

Fotocamera oculare USB 2.0

IN EVIDENZA

- Progettato per l'istruzione
- Versioni da 0,35 - 1,3 - 2,1 e 5,1 MP
- Software per PC didattico
 - Come usare le fotocamere
 - Come usare i microscopi
 - Come creare vetrini
 - Libreria di immagini
 - Fotoritocco e annotazione
 - In più lingue
- Facile da usare
- Può essere utilizzato in combinazione con telefoni Android*



SPECIFICHE TECNICHE

Le fotocamere oculari digitali USB 2.0 Euromex Color sono appositamente progettate per l'istruzione. Il software Euromex Explorer per PC è molto facile da usare per i giovani studenti. I modelli explorer 1, 2 e 5 funzionano anche su tablet e telefoni Android utilizzando il nostro software ImageFocus Alpha (è necessario un cavo OTG**)

- Tutorial interattivo sulla fotocamera, microscopi biologici e stereo e le loro funzioni (ill. 1)
- Istruzioni basate su immagini su come realizzare vetrini (ill. 2)
- Un editor di foto che consente agli utenti di visualizzare e modificare le immagini scattate con la fotocamera. Include strumenti di modifica per scrivere note su un'immagine, ritagliarla e aggiungere timbri o frecce divertenti. È possibile selezionare un'immagine o una parte di essa da salvare, inviare via e-mail o anche includerla in un report (ill. 3)
- Include una libreria di campioni di piante, insetti e animali (ill. 4)
- Una libreria personale in cui memorizzare nuove immagini (ill. 5)





* Tranne Explorer Go (DC.0350E)



** Non incluso

EXPLORER

40 (h) x 26 (ø) | 40 gr.

- La fotocamera oculare Explorer montata su un microscopio

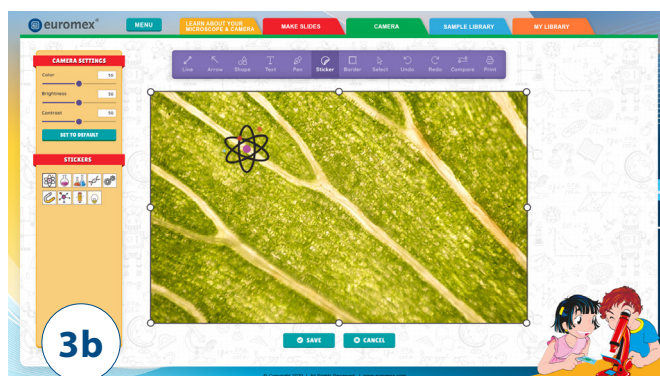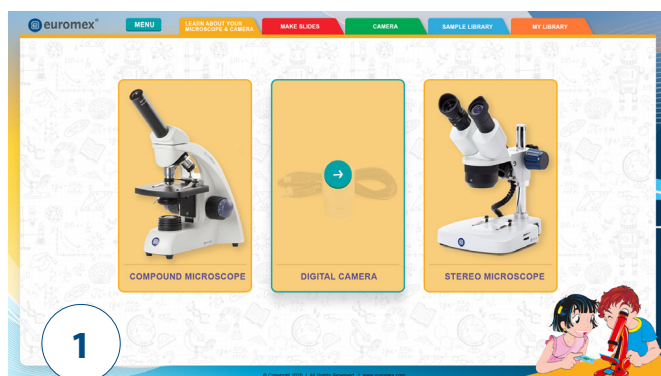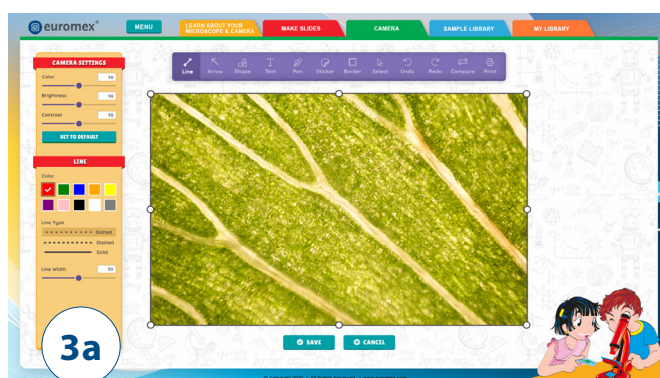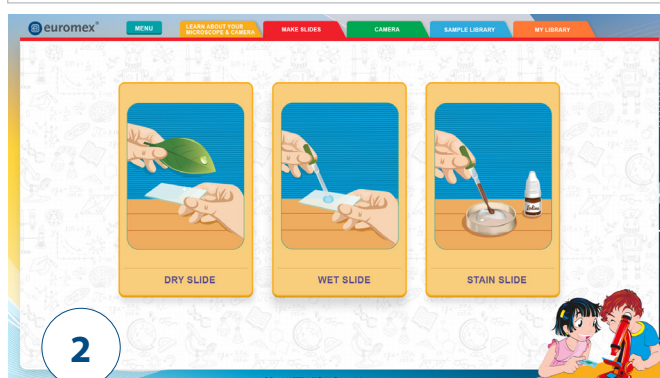

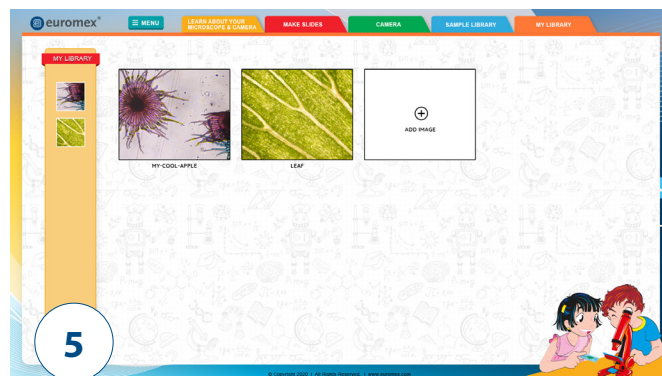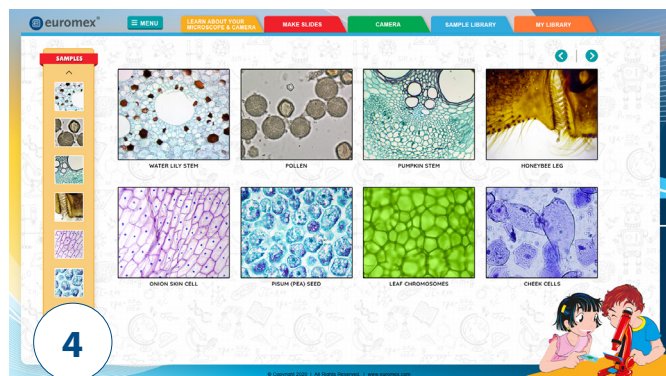

MODELLI	Pixels (Mp)	Sensore (pollici)	Dimensione pixel (µm)	Tempo di esposizione	Max. fotogrammi (p/sec)	Risoluzione	Conversione in scala di grigi	Sensibilità mV/lux-sec	Segnale/Rumore (db)	Dinamico (db)	Codice prodotto
Explorer Go!	0.35	1/4	5,6 x 5,6	Automatico	30	640 x 480	8 bit	1350	42	79	DC.0350E
Explorer 1	1.3	1/3	3,41 x 3,41	0,1-2000 ms	38	1520 x 856 760 x 428	8 bit	4510	38.5	74	DC.1300E
Explorer 2	2.1	1/2.8	2,9 x 2,9	0,1-2000 ms	30	1920 x 1080 960 x 540	8 bit	1300	43	73	DC.2100E
Explorer 5	5.1	1/2.5	2,2 x 2,2	0,1-1000 ms	30	2592 x 1944 1280 x 960 640 x 480	8 bit	1880	40	73	DC.5100E

Le fotocamere Explorer sono fornite con il software Euromex Explorer, cavo USB-2 e adattatori da 30,0 e 30,5 mm da utilizzare con gli stereomicroscopi

CONTENUTO DEL PACCHETTO

Cavo USB 2.0, adattatori da 30 e 30,5 mm, CD ROM con Software ImageFocus

Explorer